

Glaps



BEAUTY
5 en 1

Presentación
Comercial.

Beauty 5 en 1



El Beauty 5 en 1 es un dispositivo versátil que trabaja con tecnología Nano Skin. Posee funciones de: Ultrasonido, Ion Galvánico +, Ion Galvánico -, Luces Led y Masajes. Pueden usarse todas juntas o combinarse en un mismo tratamiento de acuerdo a la necesidad. Las prestaciones de esta herramienta tecnológica son: Limpieza profunda, mejora el aspecto antiestético del acné, trata y previene el envejecimiento y todas sus manifestaciones. Promueve el fortalecimiento, firmeza y rejuvenecimiento del órgano cutáneo. Las arrugas y líneas de expresión, se reducen considerablemente y la piel adquiere mayor suavidad, manteniéndose mas limpia, libre de impurezas y con sus secreciones equilibradas

Ficha Técnica

Nombre del Producto	Beauty 5 en 1
Color & Modelo	Blanco Ubf-153
Material:	ABS+ Acero inoxidable
Tamaño & Peso	185 x 55 x 55 mm Peso Neto / Peso Bruto: 181g/ 650g
Packaging	Gift box (presentación de lujo)
Tamaño packaging	170 x 220 x 70mm
Características tecnológicas	Ultrasonido (3MHz) Ion (Positivo+negativo) Photon (led terapia azul , verde y roja) 100 mAh Micromasaje: continuo y pulsado (12.000 RxS)
Tamaño de la sonda metálica	25 mm
Lugar de origen	Shenzhen, Guangdong, china
Voltage de entrada y salida	Entrada: AC100-240V, 50/60hz; Salida: DC5V, 1A
Adaptador	DC head USB line
Corriente diferencial	300 MA
Frecuencia de uso	Hasta 3 veces por semana, no mas de 30 minutos por vez.



MODO DE USO

- Configuración (ver video tutorial en www.glaps.com) :
 - Power: encendido y apagado
 - Mode: permite pasar por cada función para su programación. Cuando está «titilando» se encuentra en dicha función esperando su configuración. Una vez pulsado nuevamente «mode» pasa a la siguiente función.
 - Shif: permite graduar las intensidades o elegir las alternativas de dicha función
 - Confirm: pulsado comienza a operar con las funciones programadas
- Siempre mantener la sonda metálica en contacto pleno con la piel durante el tratamiento, cuanto más contacto tenga será mejor su performance.
- Asegurarse que el equipo se encuentre con la batería cargada (no debe aparecer el ícono de la batería junto al texto Beauty Inside)
- Es importante destacar que el equipo funciona con los productos cosmecéuticos necesarios para cada biotipo cutáneo. Asegúrese tener el asesoramiento de su cosmetóloga a tal fin.
- Mantenga el equipo seco e higienizado



Garantía Glaps

Recuerda que todos los equipos de Glaps cuentan con 6 (seis) meses de garantía por mal funcionamiento. Con la factura de compra y la garantía menor o igual a 6 meses enviar un mail a ventas@glaps.com describiendo el problema del dispositivo. Adjuntar video y/o fotos.

anmat
Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica



Producto
certificado

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo se si funciona el Ultrasonido?

Una vez retirado el film protector de la sonda metálica encender la función ultrasonido y ajustarla al nivel máximo de intensidad. Luego simplemente dejar caer una pequeña gota de agua sobre la superficie. Notará como la misma se evapora produciendo un efecto vapor fino y niebla. Esto demuestra el correcto funcionamiento del ultrasonido.

¿No siento calor o temperatura, es correcto eso?

El Beauty 5 en 1 trabaja sobre las capas mas profundas de la piel, por ende no debería percibirse temperatura sobre la epidermis mas allá del efecto del producto cosmecéutico utilizado. La única sensorialidad a percibirse son los efectos de la función «micro masaje» en caso que haya sido seleccionada en su configuración.

¿Cómo se si necesita recarga de batería?

El dispositivo muestra la necesidad de recarga o si está en proceso de recarga con un ícono que aparece en el display junto a la descripción «Beauty Inside»

¿Qué contraindicaciones tiene?

No utilizar en caso de embarazo, marcapasos, trasplantes o enfermedades en la piel, erupciones, quemaduras de sol, áreas infectadas o heridas abiertas.



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuántas veces debo usar el equipo para ver resultados?

Con un máximo de 3 veces por semana y no mas de 30 minutos cada vez obtendrá los mejores resultados, eligiendo las funciones deseadas y con los niveles de intensidad acordes para cada tipo de piel. Es importante recordar que la performance del equipo tiene directa relación con los nutrientes que estemos aplicando en el tratamiento.

¿Funciona con alguna marca de cremas / geles en particular?

Los equipos Glaps sinergizan con todas las buenas marcas presentes en el mercado. Consulte con su cosmetóloga que vehículos y que activos son recomendables para cada protocolo de uso.

¿Hay algún paso a paso donde pueda guiarme para los diferentes tratamientos?

En nuestra página oficial puedes consultar los diferentes protocolos de uso y su paso a paso mas la recomendación de los productos a utilizar: www.glaps.com

¿Cómo programo las funciones?

En nuestra página oficial encontrarás un video tutorial donde te explica como realizar la configuración de las diferentes funciones e intensidades

CONFIGURACION DE LAS FUNCIONES EN EL DISPLAY



Beauty Inside



Ultrasonic



Clean+

Relax

Photon

Time 15 Min

5 niveles de Ultrasonido


5 niveles de Ion + y -

Opción de Masaje continuo o pulsado


Selección de led rojo, azul o verde

Configuración del tiempo

¿Cómo funcionan los iones + / -?

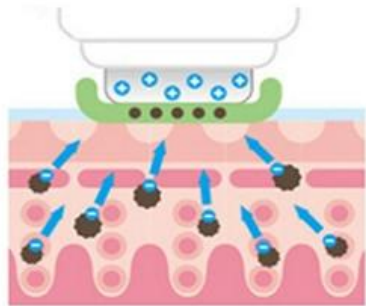

ION+: cleaning

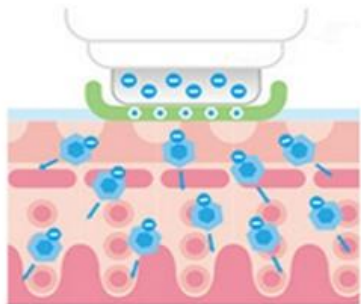

ION-: nutrition in




Utilización del photon Led rojo (tratamientos antiage)



RED LIGHT THERAPY


La luz roja puede llegar a lo mas profundo de la piel, estimulando la regeneración de colágeno y aumentando la elasticidad de la piel

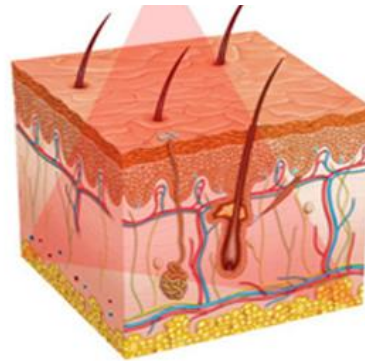

Utilización del photon Led azul (tratamientos antibacterianos)




La luz azul permite regular la secreción sebácea y acelerar el tratamiento sobre el acné.

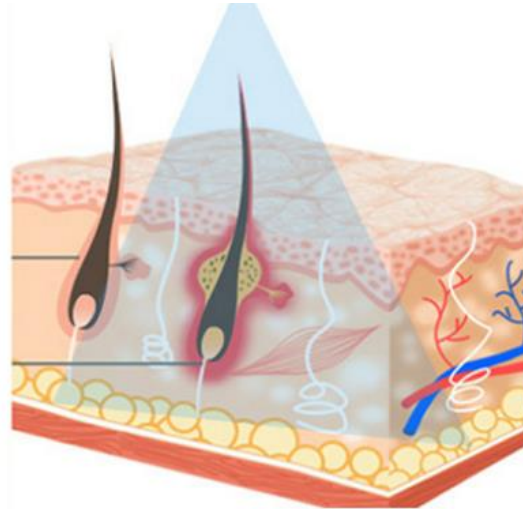

Utilización del photon Led verde (tratamientos piel sensible)



La luz verde tiene efecto neutralizante, alivia la tension descongestionando la piel.

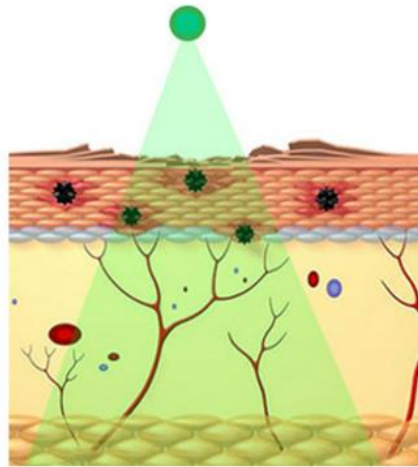

Press "Anti-acne" button, Blue light first, then Green light shows automatically in 5 minutes later.(Blue first and then Green)