

Glaps



CEPILLO DE
SILICONA
2 en 1

Presentación
Comercial.

Cepillo de Silicona



El cepillo de silicona es un producto ideal para el gabinete cosmetológico y para el uso domiciliario.

Usado por una de sus caras se puede realizar un desmaquillado e higiene facial acompañada con una suave micro-abrasión que permite afinar el estrato córneo y limpiar en profundidad.

En este caso se procede a pasar por el rostro utilizando producto de limpieza.

Si lo usamos por la otra cara y función calor, se puede efectuar un masaje con distintos grados de vibración que activa la circulación mejorando el aspecto de la piel, la absorción de activos cosméticos produciendo una agradable relajación. Utilizar con un producto de limpieza si deseamos ablandar el contenido de los poros, o con otro tipo de crema o sérum, según la finalidad del masaje

Ficha Técnica

Nombre del Producto	CEPILLO DE SILICONA
Color & Modelo	Verde -
Material:	Silicona médica
Tamaño & Peso	16*2,8*4 cm
	78,5 gr
Packaging	Retail Box Pack
Tamaño packaging	11*17*4 cm
Tiempo de carga	3 horas
Autonomía	30 minutos
Tecnología / Vibración	6000 rpm
Poder	DC3.7V 250Mah
Batería	USB - pin fino wr
Tipo de resistencia al agua	IPX 7





Garantía Glaps

Recuerda que todos los equipos de Glaps cuentan con 6 (seis) meses de garantía por mal funcionamiento. Con la factura de compra y la garantía menor o igual a 6 meses enviar un mail a ventas@glaps.com describiendo el problema del dispositivo. Adjuntar video y/o fotos.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puedo mojarlo o usarlo en la ducha?

Si, el cepillo de Silicona está especialmente diseñado para poder utilizarlo con agua o bajo la ducha

¿Cómo lo cargo? No veo donde va el cable

Al ser un dispositivo preparado para mojarse su pin de entrada es muy fino, esta en el dorsal del equipo. Presione sin miedo hasta que el pin de carga entre perfectamente.

¿Cuánto tiempo debo cargarlo? ¿Y cuanto me dura?

El equipo lleva unas 3 horas hasta tener carga full de batería. Su autonomía de uso es de 30 min.

¿Puedo graduar la intensidad de las vibraciones?

Si, el dispositivo tiene 7 niveles distintos de vibración. Notará dos flechas por sobre y por debajo del botón de encendido. Presione de acuerdo a la intensidad deseada.

¿Qué contraindicaciones tiene? No posee contraindicaciones.

Este dispositivo no invasivo nos permite utilizarlo sin restricciones, incluso mas de una vez por día.




Descripción del producto

Glaps



Modo Vibración

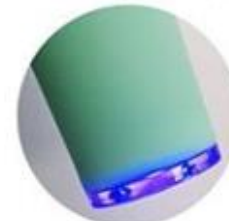

Modo CVT



7 velocidades