

The logo for Elaps features the word "Elaps" in a dark grey, sans-serif font. The letter "E" is stylized with a green circular outline that is partially filled, creating a modern, tech-oriented look.

# Elaps

GLOBAL AESTHETICS PRODUCTS & SERVICES

# CLEANER PRO Con cámara

PRESENTACIÓN COMERCIAL.



Glaps

# CLEANER PROF con cámara



- El *Cleaner Prof* es un equipo de última generación de estética multifuncional que aprovecha su excelente foco microscópico para detectar y limpiar los poros, remover acné y comedones.
- Su lente que posee 300.000 pixeles permite observar claramente la dermis y sus poros ayudando a la remoción y la limpieza profunda sin generar daños cutáneos.
- Posee cuatro cabezales para diferentes funciones y sectores del rostro convirtiéndolo en un equipo indispensable para la higiene profunda.

# Ficha Técnica

| Nombre del Producto      | Cleaner Prof con cámara         |
|--------------------------|---------------------------------|
| Material                 | Plástico                        |
| Medidas                  | 167 mm * 45 mm * 50 mm          |
| Peso Neto                | 136 gr                          |
| Sonoridad                | 60 decibeles                    |
| Packaging                | Gift box (presentación de lujo) |
| Cabezales                | 9 mm                            |
|                          | 6,5 mm                          |
|                          | Elipse                          |
|                          | Dermoabrasión                   |
| Voltage de salida        | 5 v / 1 A                       |
| Voltage de entrada       | 3 w                             |
| Adaptador                | 5V/ 500 mah DC head USB line    |
| Batería                  | 1000 mah / 3.7 v                |
| Conectividad a la cámara | wifi                            |
| Tiempo de carga          | 2 horas                         |
| Autonomía                | 2 a 5 hs(según nivel de uso)    |



# CLEANER PROF: DESCRIPCION DEL DISPLAY



# Efecto Cosmético

- El **sistema de succión** del *Cleaner Prof* con *cámara* genera en la piel mayores atributos de nutrición, firmeza e iluminación, favoreciendo el metabolismo de la circulación sanguínea y linfática.
- Estimula notoriamente la **permeabilidad** generando una mayor absorción de activos conservando la humedad de la piel y evitando el envejecimiento prematuro.
- Ayuda a la **renovación celular** y fortalece el sistema de inmunidad y resistencia a los rayos ultravioletas previniendo la acumulación de melanina.



Before



After



# Modo de Uso

1. Sostener presionando 2 o 3 segundos el botón para encender
2. Selección de potencia:
  - a. Presionar una vez para configurar la intensidad «baja» del succionador, la luz blanca quedará encendida en «suave»
  - b. Presionar otra vez para configurar la intensidad «media» del succionador, la luz blanca quedará encendida en «normal»
  - c. Presionar otra vez para configurar la intensidad «alta» del succionador, la luz blanca quedará encendida en «fuerte»
3. Nuevamente presione el botón 2 o 3 segundos para apagar el equipo
4. El equipo marcará «batería baja» cuando su poder esté bajo.
5. Cuando se esté realizando la carga de la batería la luz blanca titilará y se mantendrá fija una vez que su carga esté completa



## Elija el cabezal adecuado:



→ Cabezal 6.5 mm

→ Power



→ Cabezal  
9 mm



Cabezal  
Elipse




→ Cabezal  
Dermoabrasión

- Para la limpieza y remoción de comedones utilizar los **cabezales de 6.5 y 9 mm** de acuerdo a su piel elija la intensidad que mas le agrade.
- Para masajes y tratamiento de arrugas utilizar el **cabezal «Elipse»**, elija la intensidad que desee.
- Para un peeling mecánico utilice el cabezal para Dermoabrasión.

# MODO DE USO - CONEXIÓN CON EL CELULAR

1. Asegúrese de tener descargado en su celular el lector de códigos QR. Caso contrario descárguelo del Play Store o del Apple Store según el caso
2. Escanee el código QR del manual
3. Seleccione su sistema operativo: IOS System (I-phone) o Android System (resto)
4. Encienda el Cleaner Prof para que se habilite el wifi del equipo
5. Detecte con su celular dicha antena de wifi y conecte. Una vez conectado podrá visualizar la cámara
6. Puede capturar imágenes tocando el ícono «photo» o grabar tocando el ícono «record»
7. Pulsando el botón AR se puede aumentar o disminuir el zoom de la imagen

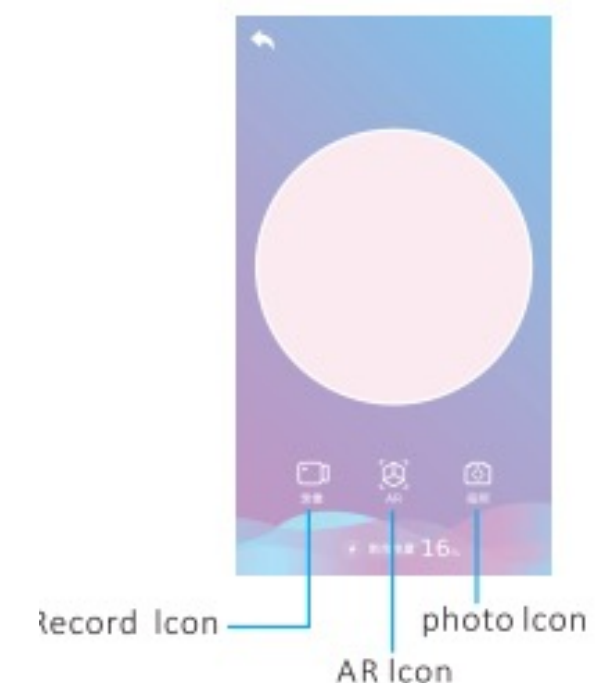

# LIMPIEZA & MANTENIMIENTO

- Cuando realice la limpieza asegúrese que el equipo este cerrado. Su componentes internos no pueden mojarse.
- Retire el cabezal del equipo antes de lavarlo con agua caliente
- El Cleaner Prof no es resistente al agua, límpielo con una toalla húmeda y no bajo la canilla o dentro de lavadoras automáticas
- Si el equipo está dañado suspenda su uso
- No separe ninguna pieza, si por algún motivo no puede usarlo con normalidad suspenda su utilización y contáctese con el proveedor

## IMPORTANTE

- No lave el equipo con agua
- Guarde en lugar seco y que no reciba luz solar

## TIPS PARA MANTENER UNA PIEL SALUDABLE

1. Higienice su rostro con agua caliente (35° a 40° C)
  2. Utilice compresas calientes para abrir los poros durante 3 minutos
  3. Coloque un ablandador o removedor de comedones en un algodón y aplíquelo durante 3 minutos en la zona nasal
  4. Luego de remover los comedones masajee la zona del poro con un tónico
  5. Utilice diariamente una máscara hidratante
- Bonus: Excelente efecto luego del baño!





# Garantía Glaps

- Recuerda que todos los equipos de Glaps cuentan con 6 (seis) meses de garantía por mal funcionamiento. Con la factura de compra y la garantía menor o igual a 6 meses enviar un mail a [ventas@glaps.com](mailto:ventas@glaps.com) describiendo el problema del dispositivo. Adjuntar video y/o fotos.

# PREGUNTAS FRECUENTES

## **1. ¿De donde se enciende? ¿Cómo selecciono la potencia?**

R: Desde el botón principal puedo encender, pasar a los tres niveles de intensidad y apagar el equipo

## **2. ¿Cómo sé si tiene la batería está cargada?**

R: Cuando uno lo carga con su puerto USB la luz blanca estará titilando mientras que si está la carga completa la luz se mantendrá fija

## **3. ¿Puedo aplicarlo en una piel sensible?**

R: Se sugiere trabajar muy puntualmente en las zonas afectadas evitando el cabezal de dermoabrasión

## **4. ¿Puedo aplicarla en otras partes del cuerpo más allá del rostro?**

R: Por supuesto, los hombros, espalda o pecho suelen ser lugares de concentración de comedones y células muertas para realizar una acción de peeling.

## **5. ¿Qué autonomía tiene el Cleaner Prof?**

R: Depende de la potencia seleccionada, puede tener entre 3 y 5 horas de autonomía.

# PREGUNTAS FRECUENTES

## **6. ¿Qué contraindicaciones tiene?**

R: Se recomienda no utilizar en personas con enfermedades agudas, tumores malignos.

No utilizar en embarazadas, madres recientes ni chicos.

No utilizar en personas con poca sensibilidad de piel.

## **7. ¿Funciona con alguna marca de cremas / geles en particular?**

R: Los equipos Glaps sinergizan con todas las buenas marcas presentes en el mercado. Consulte con su cosmetóloga que vehículos y que activos son recomendables para cada protocolo de uso.

## **8. ¿Hay algún paso a paso donde pueda guiarme para los diferentes tratamientos?**

R: En nuestra página oficial puedes consultar los diferentes protocolos de uso y su paso a paso mas la recomendación de los productos a utilizar: [www.glaps.com](http://www.glaps.com)



Seguinos!  
@Glaps.arg