

CELU TEC



Este equipo de Glaps de última generación masajea la piel y los músculos, a través de la combinación de los efectos de succión con la electroestimulación muscular (EMS) promoviendo el flujo sanguíneo y el drenaje linfático para atenuar **la celulitis y las estrías**. Además de tonificar y reafirmar la piel también alivia la tensión muscular y mejora la circulación eliminando las toxinas.

Con el modo “facial” estimula los músculos faciales con impulsos eléctricos. Los mismos hacen que los músculos se contraigan y relajen, lo que activa la producción de colágeno y suaviza la piel. **Tonifica, levanta y reduce las arrugas y las líneas de expresión.**

Es el complemento perfecto para tu rutina diaria de cuidado de la piel con resultados visibles en pocas semanas.

Ficha Técnica

Nombre del Producto	CELU TEC
Color & Modelo	Blanco
Material:	ABS
Tamaño & Peso	153 * 60 * 80
	Peso Neto : 180 gr
Packaging	Gift box (presentación de lujo)
Tiempo de carga	2 a 4 horas
Autonomía	60 minutos
Características tecnológicas	EMS: tres niveles 10 a 45 Hz LIPO: tres niveles 29 a 40 Kpa
Voltage de entrada y salida	15 voltios
Adaptador	USB line



Componentes y partes claves del equipo

EMS

Filtro

Boton de encendido

Boton de alivio

Boton de niveles EMS


Boton de niveles LIPO



Copa de succión grande



Copa de succión pequeña

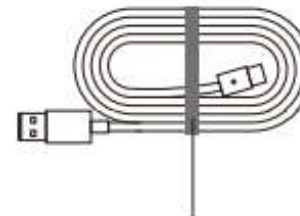

Cable cargador


Glaps
GLOBAL AESTHETICS PRODUCTS & SERVICES

※ EMS: Pulso de corriente eléctrica para estimular la contracción

※ LIPO: Movimiento estimulante de los músculos para lifting y efectos reductores

PREPARACION Y MODO DE USO

Preparación

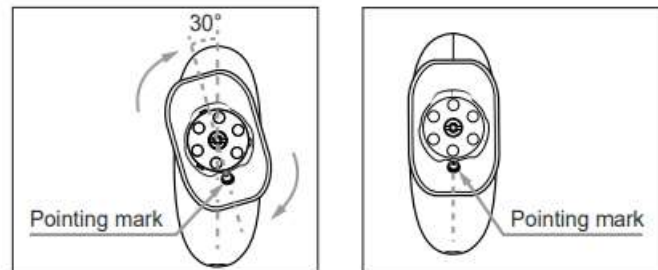

1. Cuando la batería no es suficiente para durar un ciclo (10 minutos de uso) todas las luces led parpadearán 5 veces a una frecuencia de 0.5 hz como advertencia, luego ingrese al modo de trabajo normal para su uso continuo.
2. Durante el uso cuando la batería esta demasiado baja para continuar, la unidad se apagará luego de que todas las luces led parpadeen 5 veces a una frecuencia de 0,5 hz
3. Conecte el extremo tipo C del cable al puerto de carga del dispositivo
4. Conecte el extremos USB del cable a un enchufe de carga USB estándar.
5. Durante la carga los LED del equipo se iluminarán en secuencia y formarán un círculo completo después de estar completamente cargados.
6. Una carga completa requiere de 2 a 4 horas y proporcionará una autonomía de 60 minutos de uso.
7. Una vez que este completamente cargado desconecte el adaptador de la toma de corriente.




MODO DE USO

1. Elegir la copa según el tamaño de la zona a tratar
2. Coloque suavemente la ventosa en la unidad principal en un ángulo de 30 grados. Recuerde la marca de señalamiento en la taza está en la esquina inferior derecha.
3. Gire la taza en el sentido de las agujas del reloj hasta que suene un “clic”. La marca de señalización esta en el centro del dispositivo
4. Presione el botón de encendido para iniciar el equipo. Presione una vez mas para cambiar el modo entren el modo cuerpo y el modo facial.
5. En el modo cuerpo presione el botón LIPO para ajustar el nivel de succión con la indicación relacionada iluminada. El nivel de succión cambiará en la siguiente secuencia presionando aun mas el botón LIPO. En el uso inicial comience con el nivel 1 y vaya aumentando en la medida que el cuerpo se acostumbre a la estimulación por succión. Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Succión OFF
6. Presione el botón EMS para ajustar el nivel EMS con la indicación relacionada iluminada. El nivel EMS cambiará en la siguiente secuencia presionando mas el botón EMS. En el uso inicial comience con el nivel 1 y aumente gradualmente. Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 EMS OFF.
7. En el Modo “FACE” solo se activa EMS no se genera succión. Utilice este dispositivo sin ninguna de las copas

8. Una vez que los ajustes fueron realizados coloque firmemente la copa contra el cuerpo y mantenga un movimiento lento. Se recomienda aplicar crema, loción, aceite corporal en el área específica para tener un movimiento suave y menor sensación de descarga eléctrica causada por el EMS
9. El tiempo de tratamiento se recomienda como 2 a 3 minutos por área todos los días, máximo 30 minutos para cubrir el cuerpo. No usar en exceso, máximo 5 minutos por área. Es normal que la piel se enrojezca después del uso. Desaparecerá después de 1 día de no uso.
10. Durante el uso mantenga un movimiento lento y continuo. Simplemente sostenga el dispositivo firmemente contra su cuerpo para evitar que se caiga, sin necesidad de empujarlo con fuerza. No permanezca en una posición mucho tiempo.
11. Cuando tanto LIPO como EMS están encendidos debe sentir tanto la succión de la piel como una ligera descarga eléctrica . Si alguno de los dos se siente incómodo presione el botón de ALIVIO para detenerlo inmediatamente.
12. Una vez hecho esto presione el botón de encendido para apagar el dispositivo. El equipo incluye un apagado automático a los 10 minutos
13. La taza de giro siempre en el sentido contrario de las agujas del reloj para quitarla de la unidad principal

LIMPIEZA DEL DISPOSITIVO

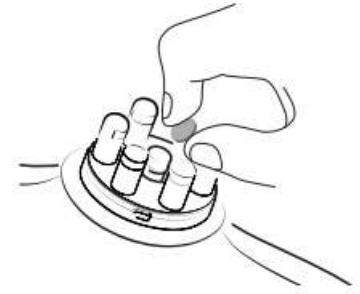

1. Asegúrese de que la unidad este desenchufada y apagada
2. Retire la taza de la unidad principal
3. Reemplace el filtro viejo por uno nuevo como se muestra en la imagen.
Frecuencia de sustitución: una vez al mes cuando la potencia de succión es menor.
4. Lave la ventosa con agua de la canilla
5. Humedezca ligeramente un paño limpio para limpiar la unidad alejada del agua.
6. No usar detergente para limpiar la unidad para evitar daños
7. Guarde en zona alejada a alta humedad o alta temperatura



PRECAUCIONES



1. Mantenga el dispositivo alejado del agua
2. No sumerja ni deje caer en el agua ni en ningún otro líquido
3. Si el dispositivo cae al agua, desconéctelo inmediatamente
4. Nunca se debe dejar desatendido mientras esta enchufado.
5. Utilice el dispositivo únicamente para el propósito previsto, como se indica en este manual.
6. No utilice accesorios que no pertenezcan al dispositivo original
7. Usar máximo 5 minutos por área, no use en exceso
8. En personas con flacidez el dispositivo puede dejar marca de hematomas luego de su uso. Normalmente desaparecerán luego de una semana.
9. En caso de estar en tratamiento medico consultar previamente. No se recomienda el uso en embarazadas ni en etapa de lactancia
10. Solo utilizar el equipo con la fuente de alimentación suministrada

CELU TEC de Glaps a la vanguardia en lipo succión

