

RADIO F PLUS



La RADIO F PLUS de Glaps es un dispositivo de cuidado de la piel que cuenta con un innovador doble cabezal que combina múltiples funciones (radiofrecuencia, microcorriente, LED, vibración, frío).

Este equipo de última generación cuenta con base para un fácil almacenamiento, es perfecto para aquellos que buscan productos multifuncionales para el cuidado de la piel.

¡Experimente la máxima comodidad y eficacia para una piel radiante!

Ficha Técnica



Nombre del Producto	RADIO F PLUS
Color & Modelo	Blanco
Material:	ABS + ACERO INOXIDABLE
Tamaño & Peso	200*47,8*62,6 mm
	Peso Neto : 244 gr
Packaging	Gift box (presentación de lujo)
Tiempo de carga	3 horas
Autonomía	30 minutos
Características tecnológicas	RF -EMS - LUZ LED - VIBRACION: 8500 vib x min Función Frio 12°
Voltage de entrada y salida	50/60hz DC 5 V 1 A
Adaptador	USB line



Componentes y partes claves del equipo



6 funciones principales



RF Function



EMS Microcurrent



Refrigeration



VR Vibration



Mode Adjust

30 min

Timing Function



DOBLE CANAL DE RADIOFRECUENCIA


LUZ AZUL

Control grasa anti acné
Control sebáceo



LUZ ROJA

Unifica los tonos de la piel
Afina la epidermis

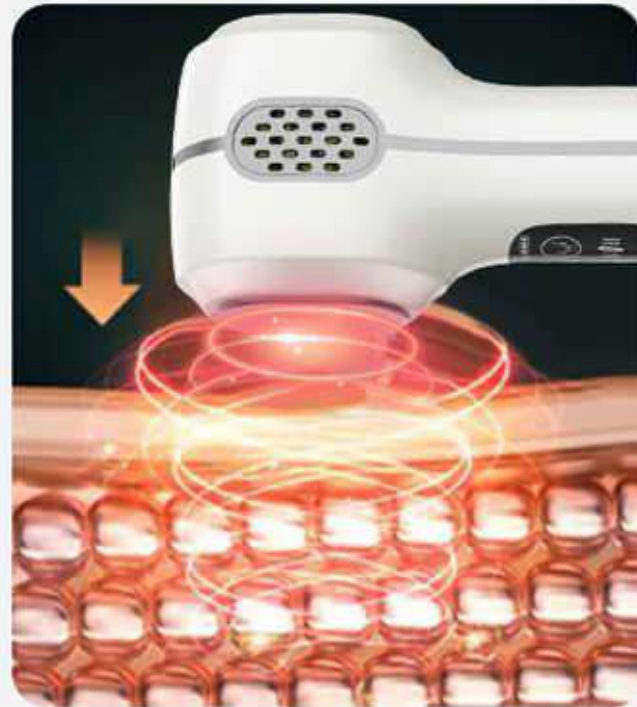

FUNCIONES PRINCIPALES – PARTE I

La temperatura de enfriamiento se encuentra estandarizada en 6°C , y la función de enfriamiento se puede utilizar continuamente hasta que se agote la energía.

Normalmente los equipos del mercado se programan con temperatura de enfriamiento de 12 grados y solo puede aplicarse por no más de 5 minutos. De lo contrario, el dispositivo puede sobrecalentarse e incluso bloquearse, afectando el uso normal.



FUNCIONES PRINCIPALES – PARTE II

Posee un cabezal de masaje superconductor que no dañará la piel. Al mismo tiempo, los productos cosméticos que se usen no se filtrarán en las grietas del cabezal de masaje. lo que podría causar daños en el cabezal o suciedad después de un período de uso



FUNCIONES PRINCIPALES – PARTE III

Posee una combinación innovadora de funciones de RF y refrigeración, siendo el único equipo del mercado en combinarlas en un solo dispositivo. El diseño de doble cabezal del dispositivo es de avanzada. La función de enfriamiento puede eliminar el edema, y el masaje RF / EMS / LED de luz / vibración trabaja para tensar la piel, haciendo que las funciones sean más completas. Teniendo la gran ventaja de no necesitar contar con un equipo de frío por separado.



PREPARACION Y MODO DE USO

Preparación



1. Cuando la batería no es suficiente para durar un ciclo (10 minutos de uso) todas las luces led parpadearán 5 veces a una frecuencia de 0.5 hz como advertencia, luego ingrese al modo de trabajo normal para su uso continuo.
2. Durante el uso cuando la batería esta demasiado baja para continuar, la unidad se apagará luego de que todas las luces led parpadeen 5 veces a una frecuencia de 0,5 hz
3. Conecte el extremo tipo C del cable al puerto de carga del dispositivo
4. Conecte el extremos USB del cable a un enchufe de carga USB estándar.
5. Durante la carga los LED del equipo se iluminarán en secuencia y formarán un círculo completo después de estar completamente cargados.
6. Una carga completa requiere de 2 a 4 horas y proporcionará una autonomía de 60 minutos de uso.
7. Una vez que este cargado completamente cargado desconecte el adaptador de la toma de corriente.



MODO DE USO

1. Elegir la copa según el tamaño de la zona a tratar
2. Coloque suavemente la ventosa en la unidad principal en un ángulo de 30 grados. Recuerde la marca de señalamiento en la taza está en la esquina inferior derecha.
3. Gire la taza en el sentido de las agujas del reloj hasta que suene un “clic”. La marca de señalización esta en el centro del dispositivo
4. Presione el botón de encendido para iniciar el equipo. Presione una vez mas para cambiar el modo entren el modo cuerpo y el modo facial.
5. En el modo cuerpo presione el botón LIPO para ajustar el nivel de succión con la indicación relacionada iluminada. El nivel de succión cambiará en la siguiente secuencia presionando aun mas el botón LIPO. En el uso inicia comience con el nivel 1 y vaya aumentando en la medida que el cuerpo se acostumbre a la estimulación por succión. Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Succión OFF
6. Presione el botón EMS para ajustar el nivel EMS con la indicación relacionada iluminada. El nivel EMS cambiará en la siguiente secuencia presionando mas el botón EMS. En el uso inicial comience con el nivel 1 y aumente gradualmente. Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 EMS OFF.
7. En el Modo “FACE” solo se activa EMS no se genera succión. Utilice este dispositivo sin ninguna de las copas

LIMPIEZA DEL DISPOSITIVO

1. Asegúrese de que la unidad este desenchufada y apagada
2. Retire la taza de la unidad principal
3. Reemplace el filtro viejo por uno nuevo como se muestra en la imagen.
Frecuencia de sustitución: una vez al mes cuando la potencia de succión es menor.
4. Lave la ventosa con agua de la canilla
5. Humedezca ligeramente un paño limpio para limpiar la unidad alejada del agua.
6. No usar detergente para limpiar la unidad para evitar daños
7. Guarde en zona alejada a alta humedad o alta temperatura



PRECAUCIONES



1. Mantenga el dispositivo alejado del agua
2. No sumerja ni deje caer en el agua ni en ningún otro líquido
3. Si el dispositivo cae al agua, desconéctelo inmediatamente
4. Nunca se debe dejar desatendido mientras esta enchufado.
5. Utilice el dispositivo únicamente para el propósito previsto, como se indica en este manual.
6. No utilice accesorios que no pertenezcan al dispositivo original
7. Usar máximo 5 minutos, no use en exceso
8. En personas con flacidez el dispositivo puede dejar marca de hematomas luego de su uso. Normalmente desaparecerán luego de una semana.
9. En caso de estar en tratamiento medico consultar previamente. No se recomienda el uso en embarazadas ni en etapa de lactancia
10. Solo utilizar el equipo con la fuente de alimentación suministrada



RADIO F PLUS

