

ULTRA CAV



La revolucionaria propuesta de GLAPS que combina cavitador ultrasónico de 1 Mgz, Radiofrecuencia de 1 Mhz, electroestimulación muscular y luces de led para obtener increíbles resultados corporales, en los brazos y en el ovalo facial.

La tecnología al servicio de la belleza hoy llega con un equipo de altísima performance y diseño para actuar contra el tejido adiposo de modo no invasivo.

Ficha Técnica

Nombre del Producto	ULTRA CAV
Color & Modelo	Blanco
Material:	ABS + ACERO INOXIDABLE
Tamaño & Peso	44 * 29 * 31
	Peso Neto : 248 gr
Packaging	Gift box (presentación de lujo)
Tiempo de carga	3 horas
Autonomía	60 minutos
Características tecnológicas	EMS / RF 1 Mghz / CAV UTRASONICO 1 Mghz/ LED Azul 465 +- 5 NM LED Rojo 625+- 5NM
Voltage de entrada y salida	50/60hz DC 5 V AC 100 240V
Adaptador	USB line




FUNCIONES PRINCIPALES: CAVITADOR ULTRASONICO

Las funciones de Cavitación, RF y EMS no pueden ser utilizadas en simultaneo pero si pueden combinarse en forma separada con la Led terapia.

En las funciones corporales / rostro la intensidad se configura automáticamente pero en el modo free se puede configurar de acuerdo a la preferencia.

Se recomienda aplicar gel, lociones o esencias antes del uso del equipo. Es importante que durante el tratamiento la piel se mantenga húmeda para un mejor efecto

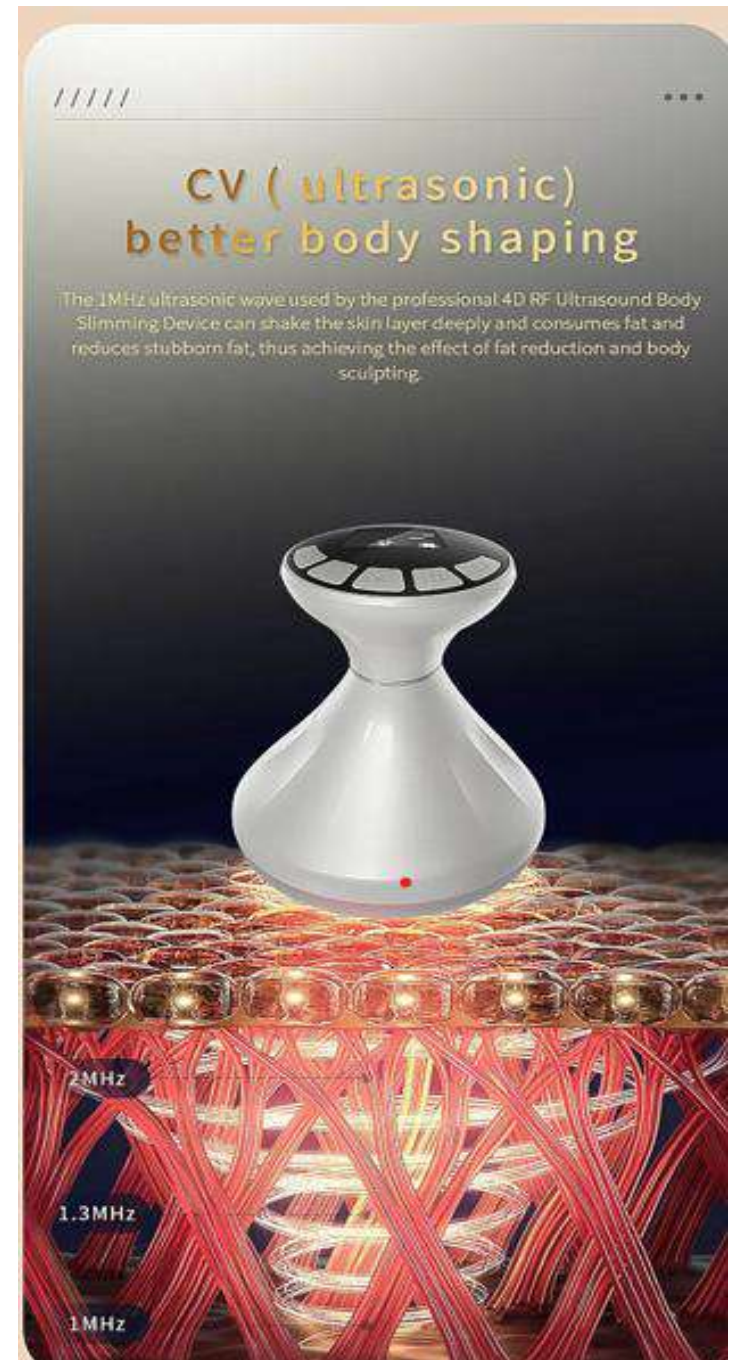

FUNCIONES PRINCIPALES – ELECTRO ESTIMULACION CORPORAL

Ayuda a la firmeza de la piel, mantiene la flexibilidad, mejora el diámetro de los poros, retiene la humedad. Puede calmar los músculos, aliviar la fatiga de la piel.

El equipo es inalámbrico y recargable, luego de su uso debe recibir carga full. Lo mismo antes del primer uso o luego de mucho tiempo de no ser utilizado.



FUNCIONES PRINCIPALES – RADIO FRECUENCIA

SKIN TEST: Recomendamos este test antes del primer uso.

Prepare el interior de su brazo de modo que se encuentre limpio y seco.

Aplique gel o loción en la parte interior del brazo y encienda el modo RF / CV Ultrasonido y use por 3 minutos.

Mueva de modo intenso el equipo sobre la piel. Si no hay eritema o temperatura dentro de las 24 horas, el equipo es óptimo para su piel. Recordar usar en nivel 1



/////

...

RF Skin Tighten

100kHz/ minutes of high-frequency electric waves, tighten the skin, ease orange peel, Dilute the fine lines.

100kHz
1min



PREPARACION , TIPS DE USO & LIMPIEZA



Es importante que la superficie de electrodos del equipo hagan contacto pleno con la piel, evitar la aplicación en ángulo donde no hay contacto absoluto

Para asegurar el funcionamiento del equipo realice su limpieza luego de cada uso con un paño o toallita de limpieza o esponja.

Asegúrese de que esté apagado y desconectado del cable. Si está con mucha suciedad se puede aplicar alcohol. No utilizar limpiadores alcalinos, ni thinner, combustibles ni removedores de uñas.

Evitar guardarlos en lugares de alta temperatura o humedad.





PROBLEMAS Y SOLUCIONES FRECUENTES



PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCION
No enciende el equipo	No tiene batería	Darle carga y luego usar
Solo funciona unos minutos	Batería baja o seteo de tiempo activo	Cargar y luego usar. Reiniciar el equipo
No carga	El cable USB no está correctamente insertado o ya esta full la carga	Colocar el cable correctamente Chequear el ícono de batería full
No se siente la RF	El área de aplicación no está húmeda o demasiado seca Nivel de intensidad bajo Movimientos muy rápidos Los electrodos no hacen contacto pleno	Aplique producto en la zona Subir el nivel de intensidad Hacer 2 a 5cm por segundo Aplicar correctamente la superficie
RF demasiado caliente	Se queda mucho tiempo en el mismo sector Los electrodos no hacen contacto Nivel de intensidad alto	Hacer 2 a 5 cm por segundo Aplicar correctamente la superficie bajar el nivel de intensidad
No siento el EMS	El área no está húmeda o demasiado seca Nivel de intensidad bajo Movimientos muy rapidos Electrodos no hacen contacto	Aplique producto en la zona Subir el nivel de intensidad 2 a 5 cm por seg Contactar correctamente
No siento la vibración Ultrasónica	No deberia sentirse. Es normal	Nada
El equipo hace ruido al usarlo	El sonido es normal por la vibración ultrasónica	Nada



Componentes y partes claves del equipo

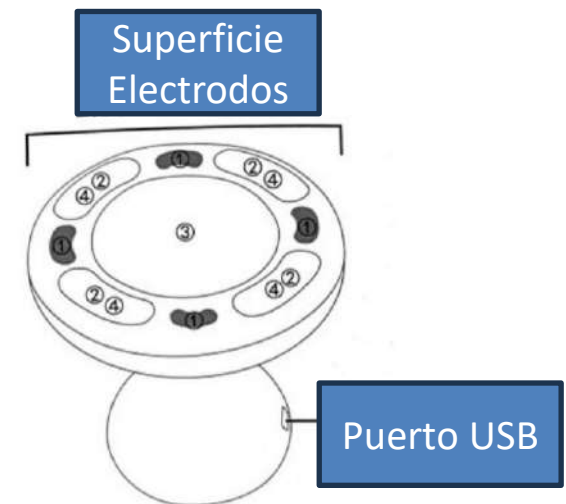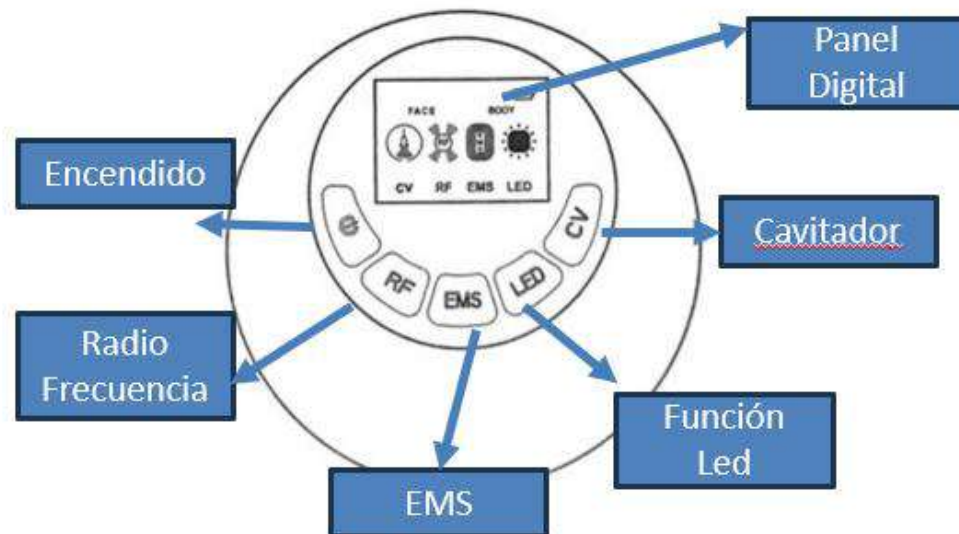

PRECAUCIONES

1. Mantenga el dispositivo alejado del agua
2. No sumerja ni deje caer en el agua ni en ningún otro líquido
3. Si el dispositivo cae al agua, desconéctelo inmediatamente
4. Nunca se debe dejar desatendido mientras esta enchufado.
5. Utilice el dispositivo únicamente para el propósito previsto, como se indica en este manual.
6. No usar en pieles afiebradas, con alergias, infección o que hayan recibido cirugía plástica
7. No utilizar en boca, cuello, nuez de Adán, áreas íntimas, debajo o cerca del corazón, dedos, muñeca o rodilla o en cualquier área de piel extremadamente fina
8. En caso de estar en tratamiento medico consultar previamente. No se recomienda el uso en embarazadas ni en etapa de lactancia
9. Solo utilizar el equipo con la fuente de alimentación suministrada

