


Contenido

- **Componentes del equipo**
 - **Instrucciones para uso del equipo:**
 1. EMS
 2. Ultrasonido
 3. Radiofrecuencia facial
 4. Radiofrecuencia corporal
 5. Luces LED
 6. Vibración
 7. Infrarrojo
 8. IONES - Galvánica
 - **Funciones combinadas pre-determinadas**
 - **Especificaciones**
 - **Advertencias**
-

Componentes del equipo

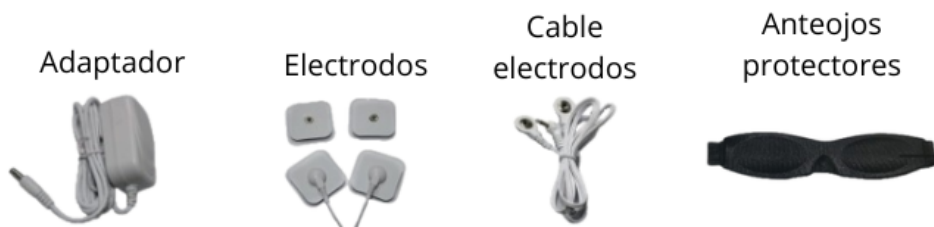

Instrucciones para uso del equipo

1. Conecte el adaptador del Master 8 en 1 (15V, 500mA) al enchufe de corriente, y conecte el otro extremo al producto. Luego toque la tecla ON/OFF para encender; la pantalla se iluminará y mostrará el modo, la función, la intensidad (categoría) y otros contenidos, mientras el modo está en estado de espera para ser seleccionado. Presione la tecla ON/OFF durante otros 3 segundos para apagar el producto.
2. Puede presionar la tecla "MODE" o la tecla "CO-MODE" para cambiar entre los modos de cuidado de la piel, sin apagar el interruptor de encendido para comenzar otros modos. Mantenga presionada la tecla "ON/OFF" durante 3 segundos para apagar la máquina, sin importar el modo de función que esté usando.
3. Este producto debe utilizarse bajo condiciones normales. Recuerde apagar la corriente y desenchufar el adaptador cuando deje de usarlo para el cuidado de la piel, para evitar quemaduras o acortar la vida útil del producto debido al sobrecalentamiento. El tiempo de uso ideal para este producto es de 10 minutos cada zona.
4. Este producto está equipado con un dispositivo de control de seguridad que, cuando la temperatura es demasiado alta (superando el límite permitido), restringe temporalmente el funcionamiento del producto. Cuando la temperatura baja a un nivel seguro, la máquina puede reiniciarse para su uso. Este dispositivo ayuda a mejorar la seguridad de sus productos.
5. Este producto está equipado con un dispositivo de control de tiempo. En caso de no realizar ninguna acción, sin importar el modo de función en el que esté funcionando, se detendrá automáticamente y se apagará después de 10 minutos. Para continuar, presione nuevamente la tecla

"ON/OFF" para encenderlo y seleccionar los modos y funciones apropiados.

6. Evite usar este producto demasiado tiempo en la misma parte del cuerpo. La sonda de masaje colocada sobre la piel debe moverse de un lado a otro para evitar la generación de energía fluctuante concentrada, ya que la energía acumulada puede causar molestias o quemaduras en la piel.
7. Cuando use este producto, asegúrese siempre de que la sonda de masaje esté en contacto completo con su piel. El contacto incompleto puede causar diferencias significativas en la impedancia de la interfaz y en la energía de la sonda de masaje, lo que puede provocar molestias o riesgo de quemaduras debido al sobrecalentamiento de la sonda.
8. Al finalizar el uso del producto, limpie la superficie de la sonda de masaje a tiempo; se recomienda limpiar con un paño suave para evitar posibles rayaduras. No limpie este producto con agua u otros productos químicos, detergentes o limpiadores, ya que podrían provocar fallos en el producto o acortar su vida útil.
9. Si tiene alguna pregunta o incomodidad con la operación del producto después de usarlo, deje de usarlo inmediatamente y comuníquese con su distribuidor o minorista local.
10. Si el producto falla, por favor devuélvalo al minorista/distribuidor local, quien lo ayudará a resolver todos los problemas.

Instrucciones para el uso de EMS

1. Limpie su piel con una toalla húmeda para facilitar el masaje con los parches de electrodos EMS.
2. Fije un par de parches de electrodos al cable EMS; el otro extremo se inserta en el puerto de salida EMS ubicado en la parte inferior del producto. Luego, pegue los parches de electrodos en diferentes partes del cuerpo (un ánodo y un cátodo cuando se utilicen). La distancia entre los dos parches debe mantenerse dentro de los 15 cm.
3. Cuando el producto esté encendido, toque la tecla "MODE" en la parte frontal del dispositivo hasta que el ícono indicador de "EMS" se ilumine en la parte superior de la pantalla, cambiando así al modo EMS.
4. Hay cinco modos de masaje para elegir, cambiando el interruptor deslizable del lado derecho del producto hacia arriba o hacia abajo: Golpeteo / Masaje / Amasado / Raspado / Adelgazamiento. Cada vez que lo mueva, se iniciará el modo de masaje correspondiente.
5. Después de elegir el método de masaje, puede ajustar la intensidad de acuerdo a su comodidad. La intensidad máxima es 6; presione suavemente "+" para aumentar la fuerza y "-" para disminuirla.
6. Se recomienda que el tiempo de uso diario no exceda los 10 minutos al principio, y que gradualmente se pueda prolongar hasta 30 minutos después de que el cuerpo se haya adaptado.
7. Después de usar este modo, puede cambiar a otro modo siguiendo las instrucciones o presionar la tecla "□" durante 3 segundos para apagar.
8. Diferentes usuarios, diferentes partes del cuerpo y diferentes distancias entre los parches de electrodos influirán en la experiencia de masaje, generando una diferencia más notable.


● Recomendamos algunos puntos especiales de EMS para funciones especiales en puntos de acupuntura china.

1) Cuando uses **TAPPING**, recomendamos colocar los electrodos de la siguiente manera:

1) When use TAPPING function, the recommended position is as follows:


BELLY
TIGHTENING

- 1.SHUIDAO(20)
- 2.SHUIFEN(6)
- 3.GUANYUAN(18)
- 4.ZHISHI(53)

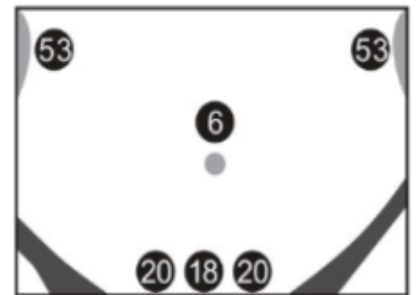

HIP
TIGHTENING

1. HUANTIAO(54)
2. CHENGFU(62)


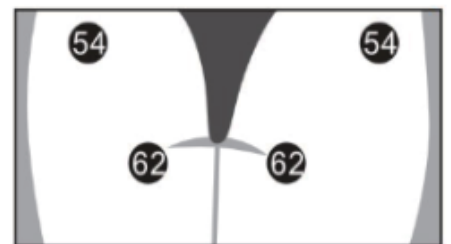


2) Cuando use MASSAGE, recomendamos colocar los electrodos de la siguiente manera:

2) When use MASSAGE function, the recommended position is as follows:

WAIST
BEAUTY

1. TIANSHU(10)
2. TAIYI(7)
3. DAIMAI(17)
4. SHENYU(47)

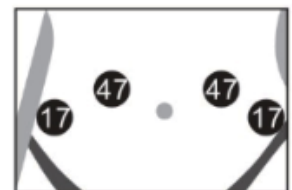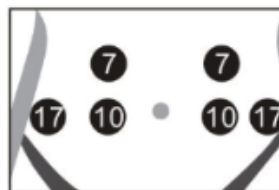


3) Cuando use **KNEAD**, recomendamos colocar los electrodos de la siguiente manera:

3) When use KNEAD function, the recommended position is as follows:

BELLY
BEAUTY

1. GUANYUAN(18)
2. DACHANGYU(48)
3. ZHONGYUAN(8)

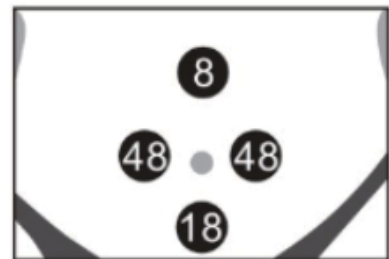


4) Cuando use **SCRAPPING**, recomendamos colocar los electrodos de la siguiente manera:

4) When use SCRAPPING function, the recommended position is as follows:

SKIN
BEAUTY

1. FEIYU(44)
2. GANGYU(45)
3. ROUMEN(5)

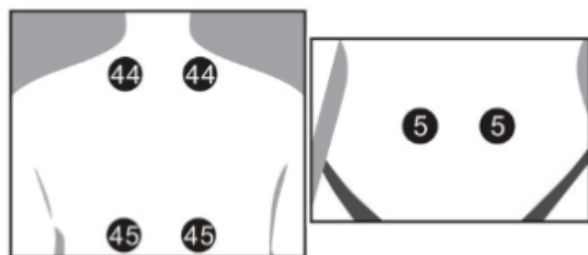


5) Cuando use **SLIMMING**, recomendamos colocar los electrodos de la siguiente manera:

5) When use SLIMMING function, the recommended position is as follows:

WEIGHT
REDUCTION

1. DAZHUI(42)
2. YANGGUAN(52)
3. ZHONGWAN(8))
4. GUANYUAN(18)
5. JULIAO(22)
6. SHENYU(47)
7. CHENGFU(62)

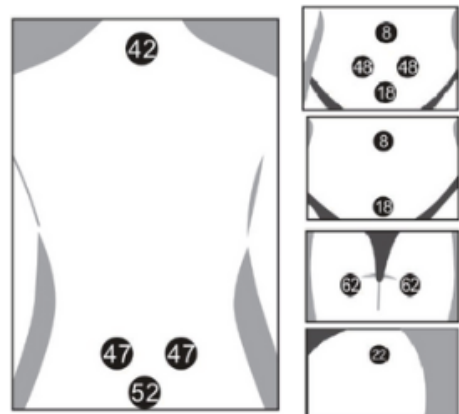



Instrucciones para el uso de Ultrasonido

1. Limpie su piel antes de usar y elija los productos de cuidado de la piel o esencias adecuados; aplique los productos o la esencia de manera uniforme sobre la piel.
2. Cuando el producto se encienda, toque la tecla "MODE" en la parte frontal del dispositivo y se iluminará el ícono indicador ">" frente a "SONIC" en la esquina superior izquierda de la pantalla. En este momento, la onda ultrasónica comenzará a funcionar con una baja intensidad (nivel 1).
3. Presione suavemente la tecla "+" en el producto para aumentar la intensidad hasta el nivel 2. Cuando la fuerza esté en el segundo nivel, presione suavemente la tecla "-" para reducirla nuevamente al primer nivel. El masaje ultrasónico de baja intensidad se utiliza principalmente para el cuidado facial, mientras que la alta intensidad puede usarse en otras partes del cuerpo, como brazos y muslos.
4. Aplique productos de cuidado de la piel o esencia de manera uniforme en el área que desea masajear. Recuerde mantener la piel húmeda. Aplique la sonda de masaje ultrasónico sobre la piel que desea tratar y muévala lentamente.
5. En este modo, evite cualquier contacto entre la sonda de masaje y las articulaciones óseas, como la zona de las rodillas.

6. Después de usar este modo, puede cambiar a otro modo siguiendo las instrucciones o presionar la tecla "ON/OFF" durante 3 segundos para apagar.

Instrucciones para el uso de Radiofrecuencia facial

La RF consiste en el uso de ondas de radiofrecuencia que penetran directamente a través de la piel, haciendo que las células y moléculas formen una rotación de resonancia fuerte (millones de veces por segundo) para generar energía térmica. Esto permite calentar el tejido de colágeno y las células grasas, aumentando la temperatura de las capas más profundas de la piel. Gracias a la estimulación de la dermis, se produce instantáneamente una contracción del colágeno y se promueve la regeneración de colágeno.

La tecnología de radiofrecuencia es muy efectiva para rellenar arrugas, eliminar cicatrices, restaurar la elasticidad de la piel, darle más luminosidad, disolver grasa y lograr un efecto de adelgazamiento.

1. Antes de utilizar esta función, limpie la piel del rostro y aplique de manera uniforme esencia líquida u otros productos de cuidado facial diario. Deje que la cabeza de masaje haga un mejor contacto con la piel facial para mejorar la experiencia.
2. Cuando el producto esté encendido, toque la tecla "MODE" en la parte frontal del dispositivo y cambie a FACE RF.
3. Al cambiar a esta función, la intensidad predeterminada es el nivel 1. Coloque la cabeza metálica de masaje (que incluye cuatro pequeñas cabezas de masaje) firmemente sobre el rostro y muévala hacia adelante y hacia atrás. Los usuarios pueden adaptarse a esta función comenzando con baja intensidad.
4. La intensidad se puede ajustar según su comodidad, siendo 6 el nivel máximo de intensidad. Presione suavemente "+" para aumentar la fuerza y "-" para disminuirla.

5. Al usar esta función, la zona de contacto de la piel puede sentirse picante y caliente, lo cual es un fenómeno normal. La cabeza de masaje metálica no debe mantenerse en una misma zona por más de 3 segundos para evitar quemaduras por contacto prolongado.
6. Después de usar este modo, puede cambiar a otro modo siguiendo las instrucciones o presionar la tecla "ON/OFF" durante 3 segundos para apagar.

Instrucciones para el uso de Radiofrecuencia corporal

1. Antes de usar esta función, limpie las zonas de la piel que desea masajear, aplique uniformemente la esencia y otros productos de cuidado de la piel diarios. Deje que la cabeza de masaje tenga un mejor contacto con la piel corporal para una mejor experiencia.
2. Cuando el producto esté encendido, toque la tecla "MODE" en la parte frontal del dispositivo hasta que el ícono indicador ">" frente a "BODY RF" se ilumine en la parte superior de la pantalla, y luego cambie al modo BODY RF.
3. Al cambiar a esta función, la intensidad predeterminada es el nivel 1. Coloque la cabeza metálica de masaje (que incluye cuatro pequeñas cabezas de masaje) firmemente sobre la piel y muévela hacia adelante y hacia atrás. Los usuarios pueden adaptarse a esta función empezando con baja intensidad.
4. La intensidad puede ajustarse según su comodidad, y el máximo es 6 niveles. Presione suavemente "+" para aumentar la fuerza y "-" para disminuirla.
5. Al usar esta función, el área de contacto de la piel puede sentirse picante y caliente, lo cual es normal. La cabeza de masaje metálica no debe permanecer en el mismo lugar por más de 3 segundos para evitar quemaduras por contacto prolongado.
6. Después de usar este modo, puede cambiar a otro modo siguiendo las instrucciones o presionar la tecla "ON/OFF" durante 3 segundos para apagar.



Instrucciones para el uso de Luces LED

Instrucciones para el uso de la LUZ LED (COLOR LIGHT)

1. Antes de usar esta función, limpie su piel y aplique de manera uniforme los productos de cuidado diario.
2. Con el producto encendido, toque la tecla "MODE" en la parte frontal del dispositivo hasta que se ilumine el ícono indicador ">" frente a "COLOR LIGHT" en la parte superior de la pantalla, cambiando así al modo COLOR LIGHT.
3. Toque las teclas "+" o "-" para seleccionar la fuente de luz de color apropiada (hay 6 tipos de luz de color disponibles) según sus necesidades.
4. Después de un uso prolongado de la irradiación de luz de color, la piel puede presentar fenómenos normales como sensación de calor, secreción de sebo potencial, o brotes de acné.
5. Después de usar este modo, puede cambiar a otro modo siguiendo las instrucciones o presionar la tecla "ON/OFF" durante 3 segundos para apagar.

Descripción de la función

La función de luz led utiliza luz intensa pulsada de 390 a 760 nm para irradiar la superficie de la piel.

Puede penetrar profundamente en la piel, actuar selectivamente sobre los pigmentos subcutáneos o vasos sanguíneos, descomponer manchas oscuras, cerrar filamentos anormales de sangre roja y eliminar diversos defectos de la piel.

Al mismo tiempo, la luz estimula la proliferación del colágeno subcutáneo, promoviendo la recombinación del tejido de colágeno original, ayudando a reducir los poros, las arrugas, restaurar la elasticidad de la piel, mejorar su salud y luminosidad.

Luces de color y sus efectos:

- **Luz roja:** Longitud de onda de 640 nm, penetra de 1 a 6 mm en la piel.
Favorece la regeneración celular de la piel, mejora la circulación humoral, aclara pigmentos, alivia el dolor de piel alérgica y activa ingredientes activos.
 - **Luz verde:** Longitud de onda de 532 nm, penetra de 0,5 a 2,0 mm en la piel.
Tiene un efecto sedante en piel y mente sensibles. Repara en profundidad, blanquea, elimina marcas amarillas y ligeras.
 - **Luz azul:** Longitud de onda de 440 nm, penetra 1 mm en la piel.
Calma la piel alérgica, elimina acné y es eficaz para eliminar bacterias que causan acné.
 - **Luz amarilla:** Longitud de onda de 583 nm, penetra de 1 a 2 mm en la piel.
Mejora el enrojecimiento, la irritación (eritema) y alivia capilares visibles en el rostro.
 - **Luz púrpura:** Longitud de onda de 430 nm, penetra 1 mm en la piel.
Aclara el eritema, elimina el acné y repara la piel.
 - **Luz cian:** Longitud de onda de 490 nm, penetra 1 mm en la piel.
Aumenta la energía celular, promueve el metabolismo y mejora la calidad de la piel.
-

Instrucciones para el uso de Vibración

La frecuencia de vibración puede alcanzar entre 8000 y 10.000 veces por minuto, lo que puede promover eficazmente la penetración y absorción de productos de cuidado de la piel y esencias. La vibración continua de alta frecuencia en el rostro tiene un buen efecto de afinamiento facial.

1. Antes de usar esta función, limpie la piel y aplique uniformemente productos o esencias para mantener la piel bien hidratada.
2. Cuando el producto esté encendido, toque la tecla "MODE" en la parte frontal del dispositivo hasta que el ícono indicador ">" frente a "VIBRA" se ilumine en la parte superior de la pantalla, y luego cambie al modo VIBRA.
3. Esta función tiene una sola intensidad de trabajo y no es necesario ajustar la fuerza usando las teclas "+" o "-".
4. Coloque la sonda de masaje cerca de la parte del cuerpo que desea tratar. Bajo la acción de la vibración de alta frecuencia, los productos de cuidado o esencias penetrarán en la piel.
5. Después de usar este modo, puede cambiar a otro modo siguiendo las instrucciones o presionar la tecla "ON/OFF" durante 3 segundos para apagar.

Instrucciones para el uso de Infrarrojo

La función de calentamiento por infrarrojo lejano es muy adecuada para el cuidado de la piel. No solo proporciona una luz beneficiosa para el cuerpo

humano, sino que también ayuda a nutrir la piel. Por eso, antes de utilizar esta función, asegúrese de aplicar productos de cuidado o esencias sobre la piel.

1. Cuando el producto esté encendido, toque la tecla "MODE" en la parte frontal del dispositivo hasta que el ícono indicador ">" frente a "INFRARED" se ilumine en la parte superior de la pantalla, y luego cambie a la función de INFRARROJO.
2. Esta función también tiene una sola intensidad de trabajo, y no necesita ser ajustada con las teclas "+" o "-".
3. Coloque la sonda de masaje del producto cerca del cuerpo o apóyela sobre la zona a tratar. La energía de la luz infrarroja penetrará en la piel, permaneciendo más de 10 segundos después de que se sienta una sensación de calor en las áreas correspondientes.
4. En el modo de calentamiento por infrarrojo, no permanezca mucho tiempo en una misma zona del cuerpo para evitar molestias o quemaduras.
5. Después de usar este modo, puede cambiar a otro modo siguiendo las instrucciones o presionar la tecla "ON/OFF" durante 3 segundos para apagar.



Instrucciones para el uso de IONES - Galvánica

Los iones pueden adsorber la suciedad cargada, como la grasa, el polvo dañino del aire y los residuos cosméticos, logrando así blanquear, reparar la piel, eliminar ojeras, eliminar el acné y otros efectos beneficiosos.

1. Cuando el producto esté encendido, toque la tecla "MODE" en la parte frontal del dispositivo hasta que el ícono indicador ">" frente a "IONS" se ilumine en la parte superior de la pantalla, cambiando así al modo IONS.
2. Esta función tiene una sola intensidad de trabajo y no necesita ajustarse utilizando las teclas "+" o "-".
3. Coloque la sonda de masaje del producto cerca de la piel a tratar, y los aniones liberados por la cabeza actuarán sobre la piel para lograr el efecto de limpieza.
4. Después de usar este modo, puede cambiar a otro modo siguiendo las instrucciones o presionar la tecla "ON/OFF" durante 3 segundos para apagar.



Instrucciones para el uso de las funciones combinadas predeterminadas CO-MODE

Para facilitar al usuario el uso de dos modos de cuidado de la piel al mismo tiempo, el producto cuenta con seis modos de combinación. Los métodos de operación son los siguientes:

1. Cuando el producto esté encendido, toque la tecla CO-MODE en la parte frontal del dispositivo. El producto cambiará entre los seis modos de combinación.
 - **EMS + VIBRA**
En el modo de combinación "EMS" + "VIBRA", los íconos indicadores ">" de "EMS" y "VIBRA" se iluminan al mismo tiempo en la parte superior de la pantalla. Las demás operaciones se detallan en los pasos 4 a 7 de las

instrucciones de la función EMS, donde VIBRA actúa como función auxiliar y normalmente está activa en este modo de combinación.

- **EMS + INFRARROJO**

En el modo de combinación "EMS" + "INFRARROJO", los íconos indicadores ">" de "EMS" y "INFRARROJO" se iluminan al mismo tiempo en la parte superior de la pantalla. Las demás operaciones se detallan en los pasos 4 a 7 de las instrucciones de la función EMS, donde INFRARROJO actúa como función auxiliar y normalmente está activa en este modo de combinación.

- **SONIC + INFRARROJO**

En el modo de combinación "SONIC" + "INFRARROJO", los íconos indicadores ">" de "SONIC" e "INFRARROJO" se iluminan al mismo tiempo en la parte superior de la pantalla. Las demás operaciones se detallan en los pasos 3-5 de las instrucciones de la función SONIC, donde INFRARROJO actúa como función auxiliar y está normalmente activa en este modo.

- **SONIC + IONES**

En el modo de combinación "SONIC" + "IONES", los íconos indicadores ">" de "SONIC" e "IONES" se iluminan al mismo tiempo en la parte superior de la pantalla. Las demás operaciones se detallan en los pasos 3-5 de las instrucciones de la función SONIC, donde IONES actúa como función auxiliar y está normalmente activa en este modo.

- **COLOR LIGHT + VIBRA**

En el modo de combinación "COLOR LIGHT" + "VIBRA", los íconos indicadores ">" de "COLOR LIGHT" y "VIBRA" se iluminan al mismo tiempo en la parte superior de la pantalla. Las demás operaciones se detallan en los pasos 3-6 de las instrucciones de la función COLOR LIGHT, donde VIBRA actúa como función auxiliar y está normalmente activa en este modo.

- **COLOR LIGHT + FACE RF**

En el modo de combinación "COLOR LIGHT" + "FACE RF", los íconos indicadores ">" de "COLOR LIGHT" y "FACE RF" se iluminan al mismo tiempo en la parte superior de la pantalla. Las demás operaciones se detallan en los pasos 3-6 de las instrucciones de la función COLOR LIGHT. En este modo, FACE RF es la función auxiliar, que permanece activada normalmente, y la intensidad es de 3 niveles.

Precauciones después del uso:

1. En el estado de arranque, presione la tecla "□" durante 3 segundos para apagar el producto y retire el adaptador de corriente del enchufe.
2. Retire el cable EMS del enchufe inferior del producto, afloje el parche de electrodos y guárdelo en la caja de embalaje del producto.
3. Limpie la superficie de la sonda de masaje y el cuerpo del dispositivo con una toalla húmeda.
4. No use diluyentes, gasolina u otros líquidos volátiles para limpiar el producto.
5. Una vez limpio el producto, guárdelo en una caja de embalaje para el próximo uso.

Precauciones

⚠ **Advertencia:** Por favor, lea cuidadosamente la siguiente información antes de usar su máquina.

1. Este producto es un instrumento de precisión bien diseñado. Para que funcione perfectamente, lea la información a continuación y siga todas las instrucciones. Esto le ayudará a garantizar la validez de la garantía y a extender el ciclo de vida de su producto.
2. Almacene su producto lejos de la humedad y no lo utilice bajo el agua. De lo contrario, los componentes electrónicos de su producto pueden corroerse o producir un cortocircuito.
3. No almacene este producto cerca de fuentes de calor, ya que puede causar fallas, como acortar la vida útil del producto o deformar/derretir componentes plásticos.
4. No deje caer el producto ni lo someta a vibraciones, ya que podría causar fallos de funcionamiento.
5. Nunca intente desmontar el producto usted mismo. Todos los componentes del producto solo deben ser mantenidos y reparados por técnicos profesionales.
6. No utilice un adaptador diferente al incluido en el paquete.
El uso de un adaptador incompatible puede provocar fallas de funcionamiento y anulará la validez de la garantía.
7. No tire del cable al desenchufar el producto. Para evitar daños al equipo, la mejor forma es sujetar el enchufe y extraerlo desde la toma.
8. Mantenga todos los cables organizados. No enrede los cables ni dañe su superficie, ya que esto puede causar fallas o daños.
9. Las siguientes personas deben evitar el uso de este producto:
 - Pacientes con tumores malignos
 - Mujeres embarazadas o durante su período menstrual
 - Pacientes con enfermedades dermatológicas relacionadas con hemorragias
 - Pacientes de urgencia con enfermedades no identificadas

- Niños y personas mayores

10. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.

Los niños no deben jugar con este producto, ya que las piezas desmontadas podrían ser ingeridas accidentalmente.